



MANUAL DE INSTRUCCIONES


BANCADA // SERIE PB-410

Revisión 01/14



INDICE

01	INTRODUCCIÓN	
01.1	Utilización del manual	05
01.2	Ficha técnica	06
02	INSTALACIÓN	
02.1	Transporte y desembalaje	11
02.2	Puntos de anclaje	12
03	FUNCIONAMIENTO	
03.1	Comandos	15
03.2	Elementos del sistema manual	19
03.3	Operación de carga y descarga	21
03.4	Sujeción de la camilla palas	22
03.5	Tensores	23
03.6	Regulación del ángulo de carga	24
04	MONTAJE Y DESPIECE	
04.1	Explosionado general SERIE PB-410	25
04.2	Explosionado plataforma superior PB-410 • PB-410/3	26
04.3	Listado de referencias plataforma superior PB-410 • PB-410/3	27
04.4	Explosionado plataforma superior PB-410/4	28
04.5	Listado de referencias plataforma superior PB-410/4	29
04.6	Explosionado plataforma superior PB-410/5	30
04.7	Listado de referencias plataforma superior PB-410/5	31
04.8	Explosionado carro plataforma base SERIE PB-410	32
04.9	Listado de referencias plataforma base SERIE PB-410	33
04.10	Explosionado pletina sujeción plataforma base SERIE PB-410	34
04.11	Listado de referencias pletina sujeción plataforma base SERIE PB-410	35
04.12	Explosionado guía plataforma base PB-410 • PB-410/4 • PB-410/5	36
04.13	Listado de referencias guía plataforma base PB-410 • PB-410/4 • PB-410/5	37
04.14	Explosionado guía plataforma base PB-410/3	38
04.15	Listado de referencias guía plataforma base PB-410/3	39
05	MANTENIMIENTO GENERAL	40
06	AVISOS LEGALES	41
07	GARANTÍA DE PRODUCTO	42

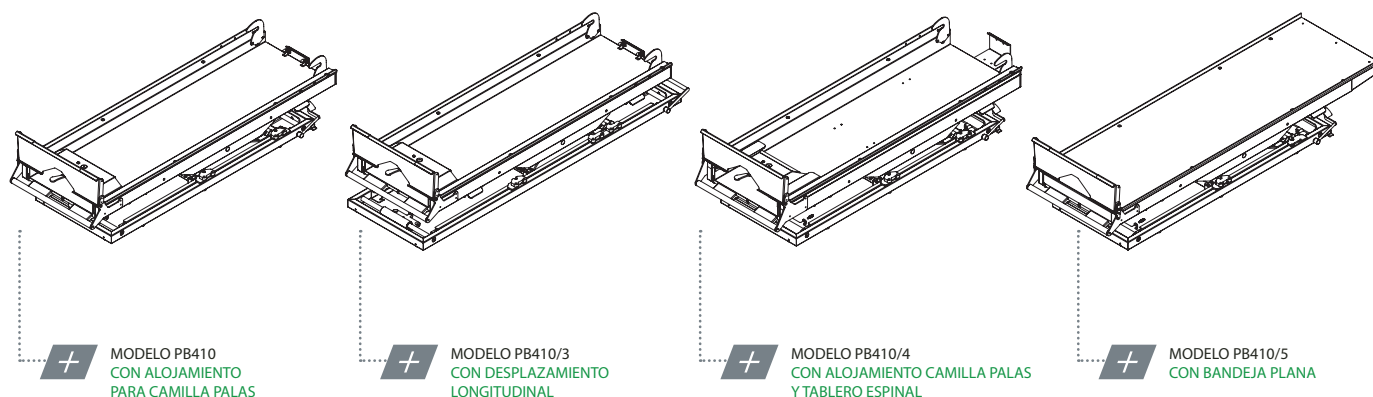



01 INTRODUCCIÓN

01.1 Utilización del manual

El contenido del manual, incluye instrucciones de utilización y de mantenimiento del producto, así como también la manera de resolver pequeñas averías que pudieran surgir.

Se recomienda antes de poner en funcionamiento el producto, se lean detenidamente este manual, para evitar deterioros a causa de una mala utilización.

No pierda este documento, debe estar accesible a cualquier consulta que pudiera surgir por parte del personal sanitario.

Recuerde, un buen uso y mantenimiento son necesarios para el buen funcionamiento del producto.

Cada producto lleva incorporada una etiqueta adhesiva identificativa con el número de serie y el modelo. Conserve estos números para poderlos indicar al distribuidor en caso necesario.

01 INTRODUCCIÓN

01.2 Ficha técnica

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS // PB 410

LARGO 1800 mm

ANCHO 595 mm

ALTO 315 mm





PESO 83 Kg

TRENDELEMBURG $-10^{\circ} / +10^{\circ}$

ALTURA CARGA ± 100 mm

MOVIMIENTO LATERAL 300 mm

CARGA MÁX. 220 Kg

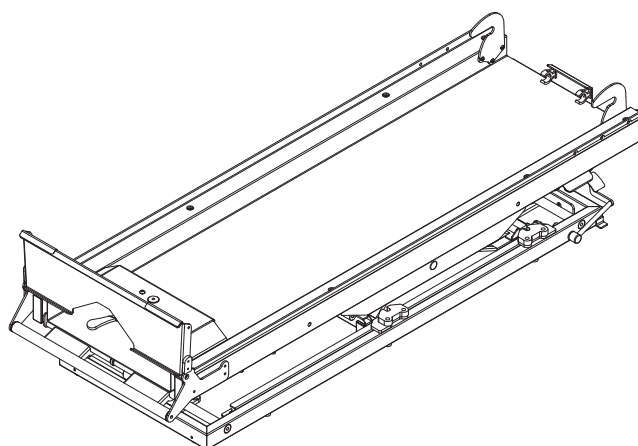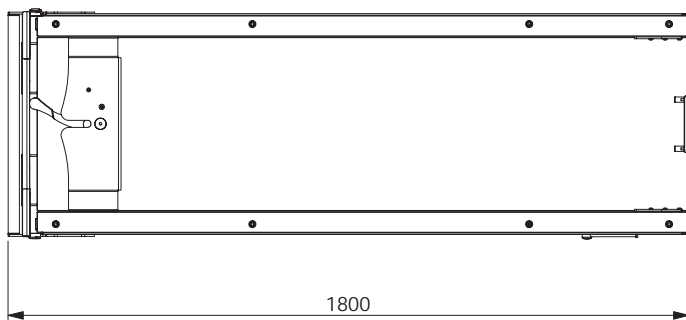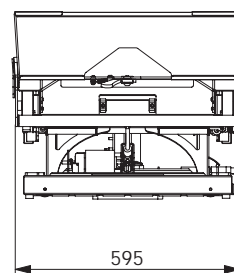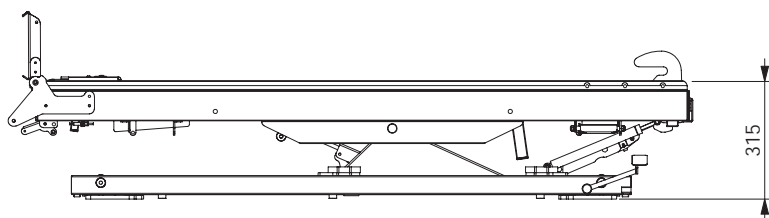

01 INTRODUCCIÓN

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS // PB 410/3

LARGO 1925 mm

ANCHO 595 mm

ALTO 315 mm





PESO 85 Kg

TRENDELEMBURG $-10^{\circ} / +10^{\circ}$

ALTURA CARGA ± 40 mm

MOVIMIENTO LATERAL / LONG. 300 mm / 360 mm

CARGA MÁX. 220 Kg

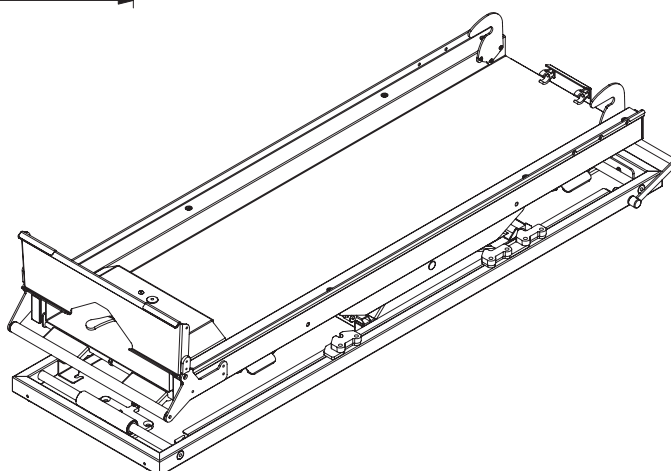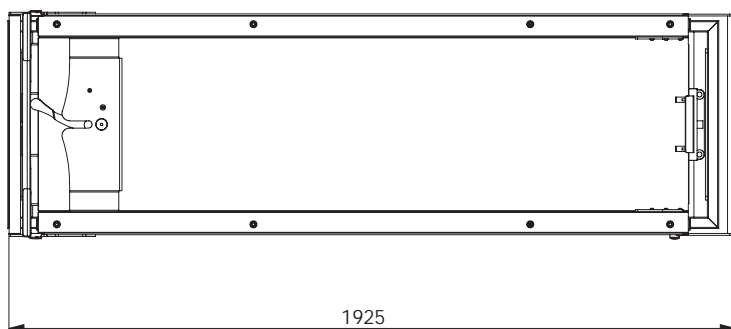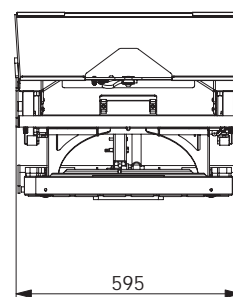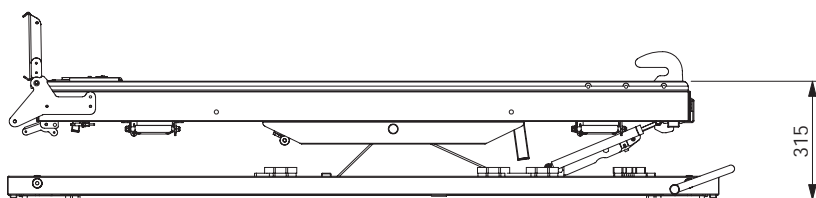

01 INTRODUCCIÓN

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS // PB 410/4

LARGO 1930 mm

ANCHO 600 mm

ALTO 345 mm





PESO 83 Kg

TRENDELEMBURG $-10^{\circ} / +10^{\circ}$

ALTURA CARGA ± 40 mm

MOVIMIENTO LATERAL 300 mm

CARGA MÁX. 240 Kg

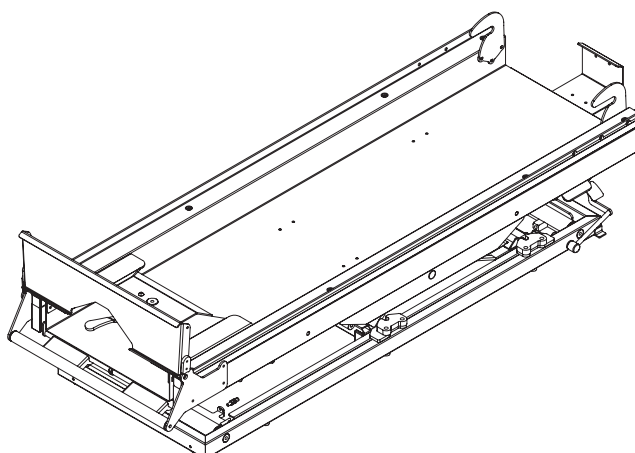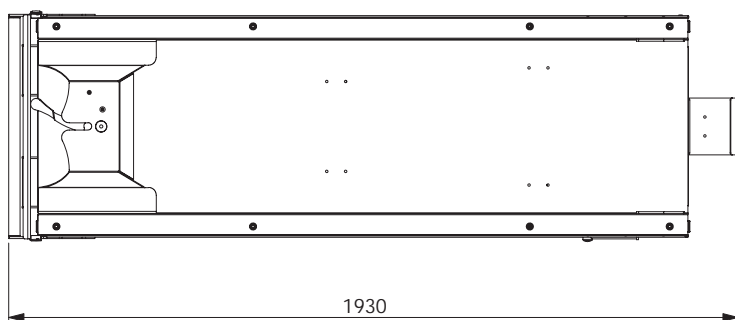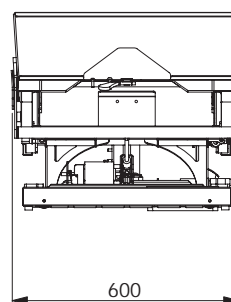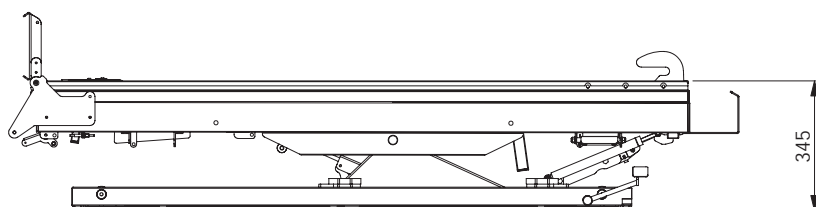

01 INTRODUCCIÓN

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS // PB 410/5

LARGO 2000 mm

ANCHO 595 mm

ALTO 315 mm





PESO 88 Kg

TRENDELEMBURG $-10^{\circ} / +10^{\circ}$

ALTURA CARGA ± 40 mm

MOVIMIENTO LATERAL 300 mm

CARGA MÁX. 220 Kg

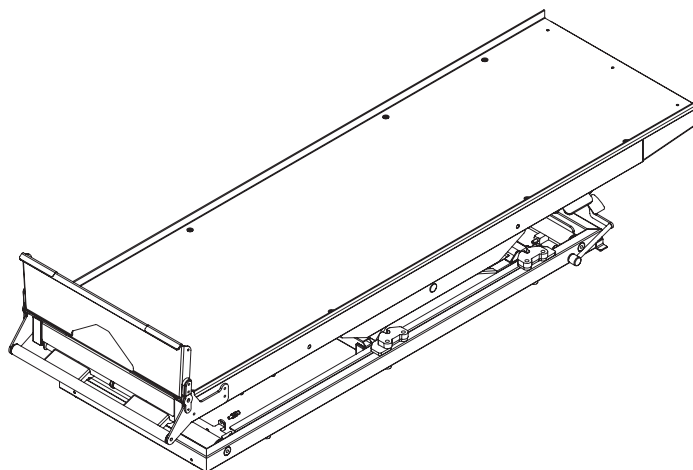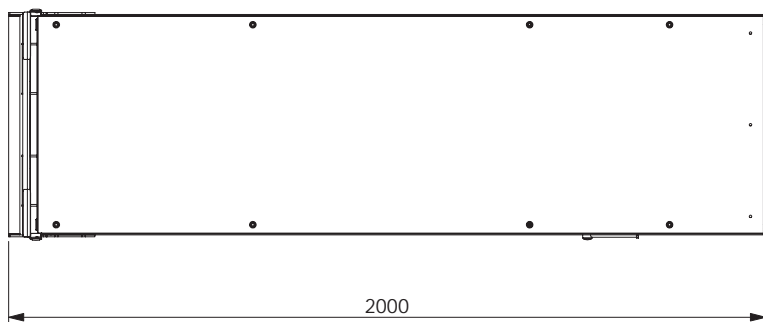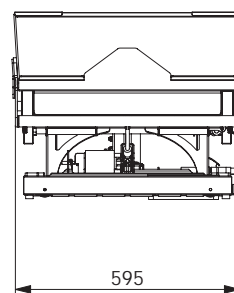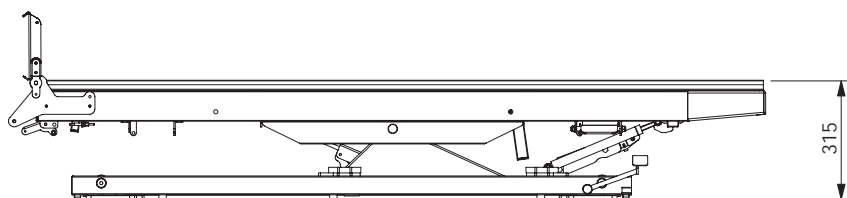




02 INSTALACIÓN

02.1 Transporte y desembalaje

Primero retire cuidadosamente el embalaje para no dañar el exterior de la bancada.

1. Transporte con grúa (carga elevada)

- Pasar unas cintas a través de la plataforma superior para su transporte. (Como se indica en los gráficos)
- Transportar la carga nivelada y siguiendo todos los preceptos y normativas respecto del transporte de cargas en suspensión.

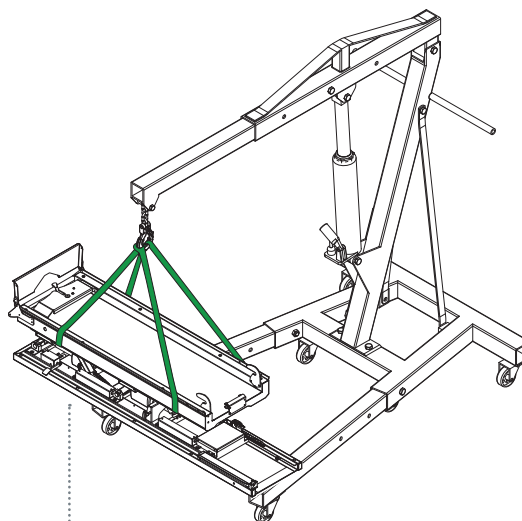


TRANSPORTE CON GRUA
FIJAR LAS CINTAS PARA NIVELAR EL PESO DE LA CARGA

2. Transporte con carretilla elevadora

- Poner un palet o superficie plana bajo la bancada y transportar transversalmente.
- No cargar la bancada directamente sobre la carretilla sin palet o superficie plana de apoyo.
- No cargar la bancada longitudinalmente sobre la carretilla si no se dispone de una base suficientemente larga.

Cada bancada ha sido inspeccionada minuciosamente al salir de fábrica. Para asegurarse que no se ha deteriorado en el transporte, se ruega inspeccionar detenidamente el exterior y el interior, y en caso de encontrar algún desperfecto, comuníquese inmediatamente al instalador.

Para un óptimo funcionamiento, la bancada debe estar nivelada.

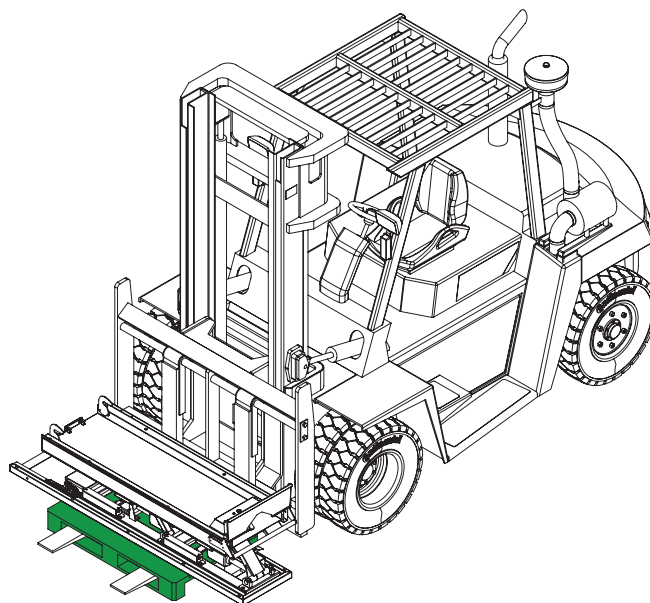


TRANSPORTE CON CARRETILLA ELEVADORA
UTILIZAR SIEMPRE BASE PLANA DE APOYO

02 INSTALACIÓN


02.2 Puntos de anclaje

Antes de poner en funcionamiento la bancada debe asegurarse de que todos y cada uno de los puntos de anclaje están colocados y apretados.

ANCLAJE BANCADA PB410 (8 puntos de anclaje)

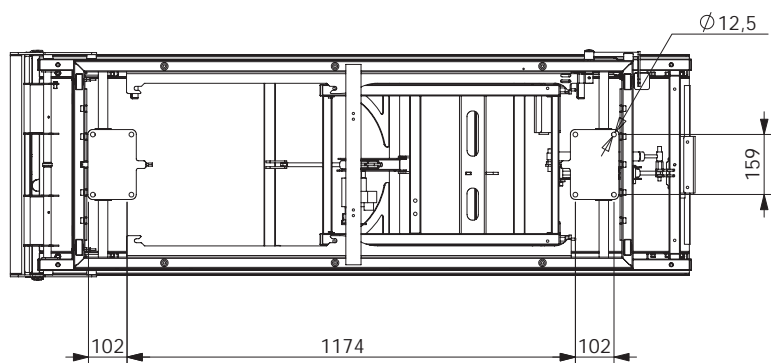


ANCLAJE BANCADA PB410/3 (8 puntos de anclaje)

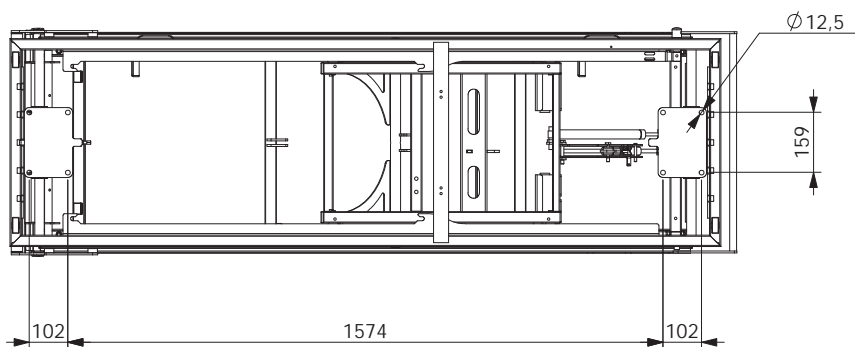


02 INSTALACIÓN

ANCLAJE BANCADA PB410/4 (8 puntos de anclaje)

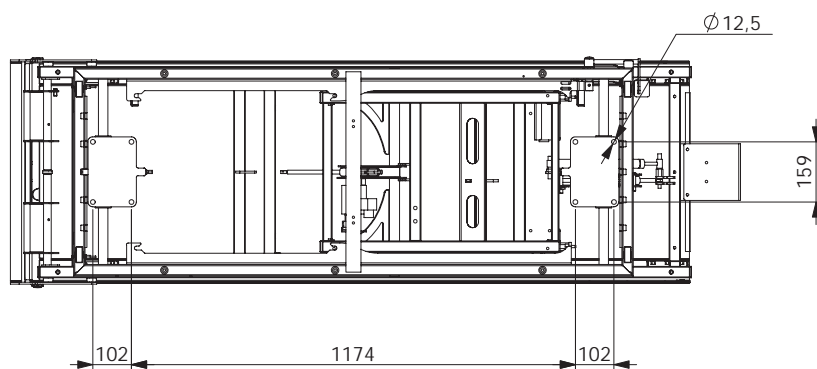

ANCLAJE BANCADA PB410/5 (8 puntos de anclaje)

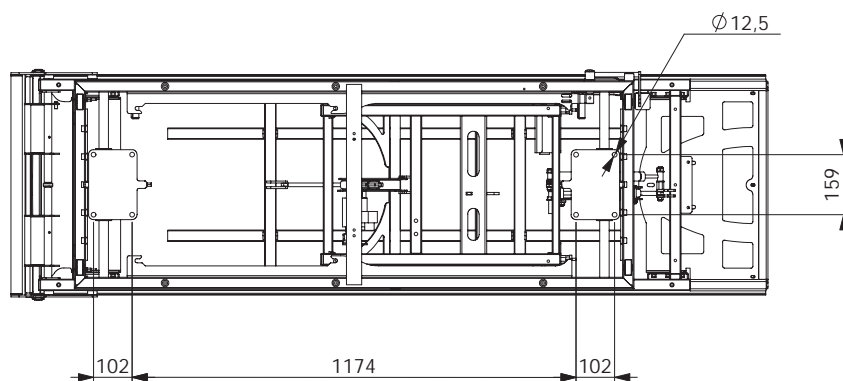




03 FUNCIONAMIENTO

03.1 Comandos PB-410



1. Cierre anclaje trasero camilla
2. Maneta de extracción
3. Maneta de carga
4. Palanca de desplazamiento lateral
5. Maneta de movimiento trendelemburg

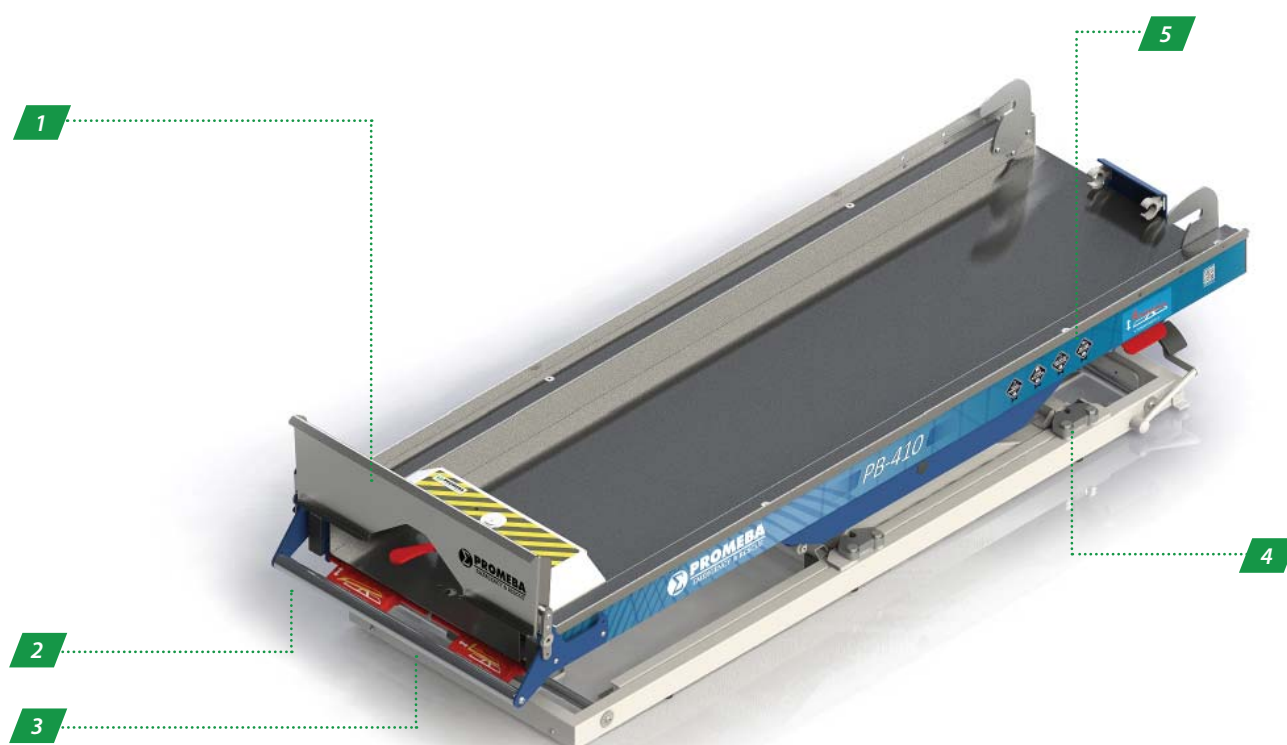

03 FUNCIONAMIENTO

03.1 Comandos PB-410/3


1. Cierre anclaje trasero camilla
2. Maneta de extracción
3. Maneta de carga
4. Maneta de movimiento trendelemburg
5. Palanca de desplazamiento lateral
6. Maneta de desplazamiento longitudinal

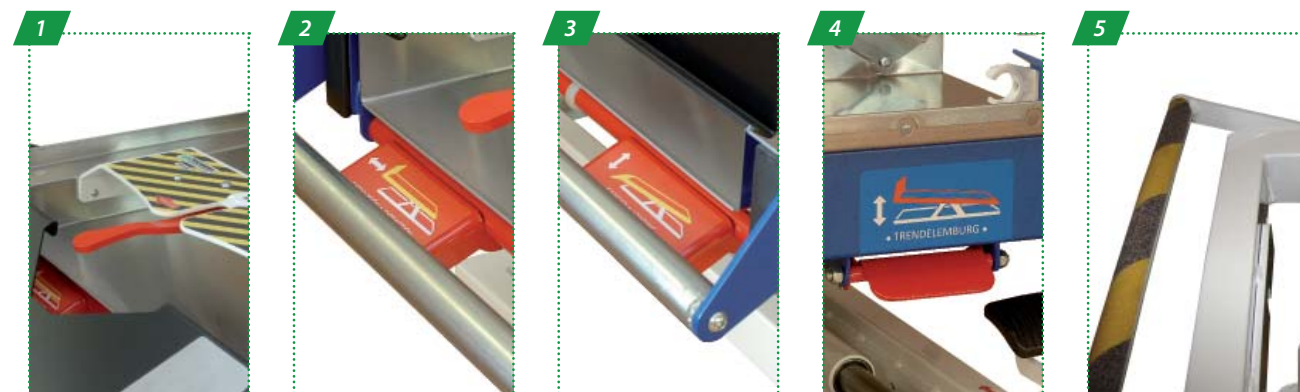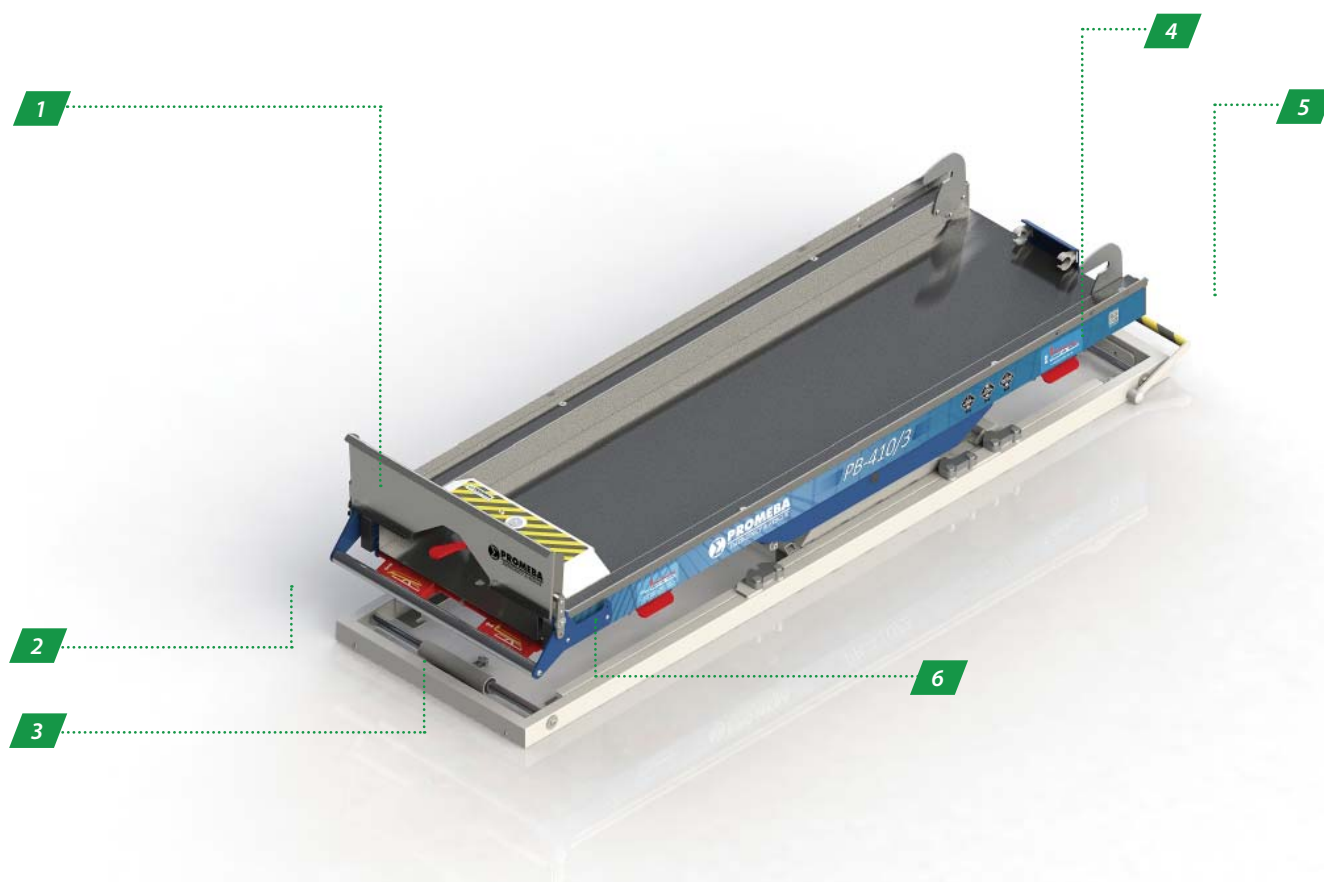

03 FUNCIONAMIENTO

03.1 Comandos PB-410/4


1. Cierre anclaje trasero camilla
2. Maneta de extracción
3. Maneta de carga
4. Palanca de desplazamiento lateral
5. Maneta de movimiento trendelemburg

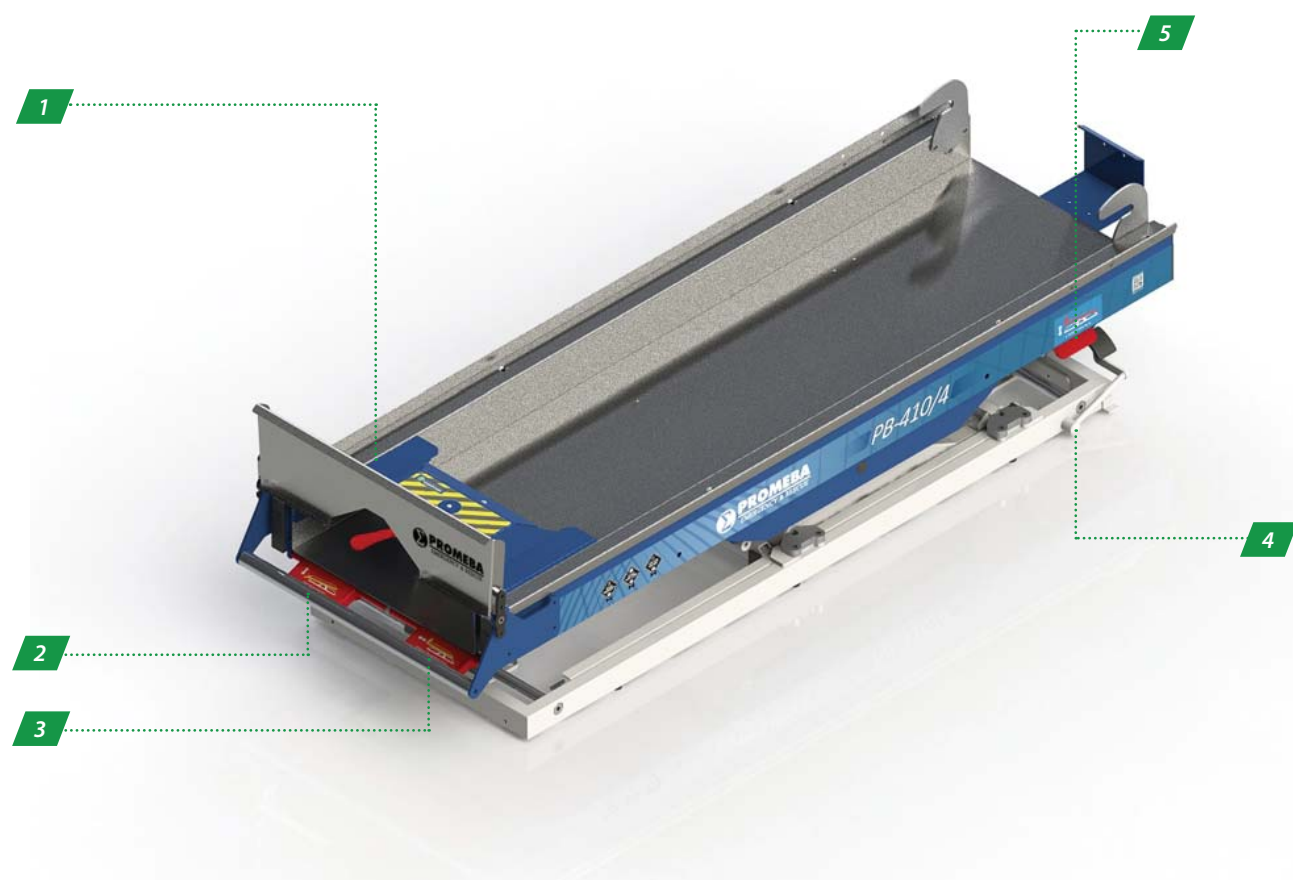

03 FUNCIONAMIENTO

03.1 Comandos PB-410/5

1. Maneta de extracción
2. Maneta de carga
3. Palanca de desplazamiento lateral
4. Maneta de movimiento trendelemburg

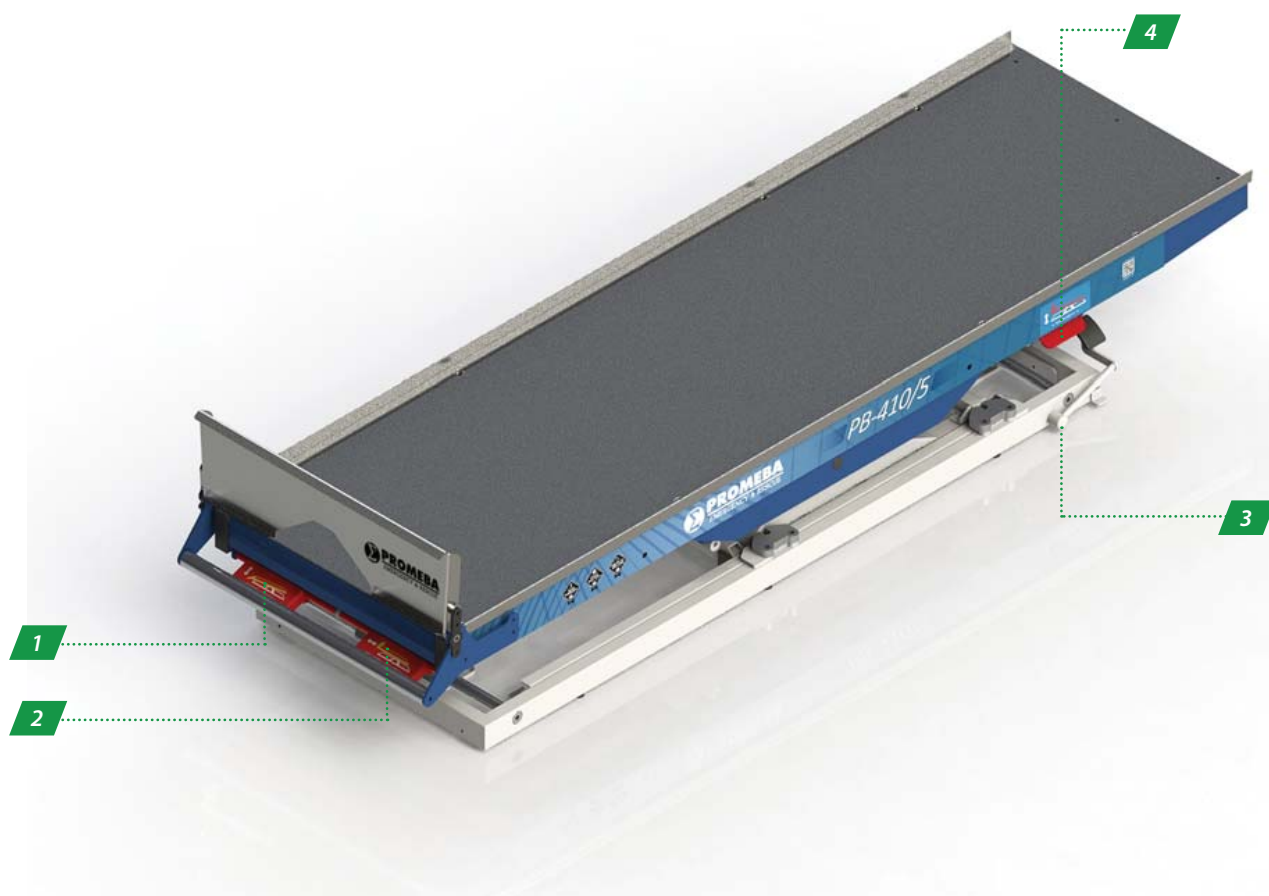

03 FUNCIONAMIENTO

03.2 Elementos del sistema manual

DESPLAZAMIENTO LATERAL

Accione la palanca situada en el *lateral posterior* derecho de la bancada, ejerciendo sobre ella un pequeño esfuerzo con el pie y acompañando dicho movimiento mediante su deslizamiento con las manos.

El desplazamiento lateral total es de **300 mm.**



DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL MODELO PB-410/3

Accione la palanca situada en el *lateral frontal* derecho de la bancada, ejerciendo sobre ella un pequeño esfuerzo con el pie y acompañando dicho movimiento mediante su deslizamiento con las manos.

El desplazamiento longitudinal total es de **360 mm.**



03 FUNCIONAMIENTO

03.2 Elementos del sistema manual

TRENDELEMBURG (Procline / Declive)

El movimiento se produce mientras está pulsando la maneta lateral, al soltarla bloqueará la posición.



· Posición *trendelemburg procline* (1):

En esta posición la bancada se eleva desde la posición en que está situada la cabeza del paciente.

1



· Posición *trendelemburg declive* (2):


En esta posición la bancada se eleva desde la posición en que están situados los pies del paciente.

2



POSICIÓN CERO O REPOSO

Posición cero, también conocida como posición de reposo es la que la bancada está completamente horizontal y plegada sobre sí misma.

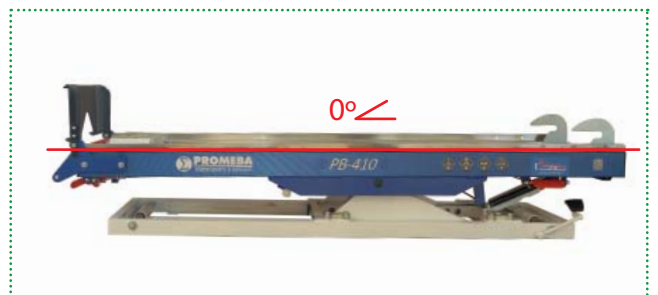

03 FUNCIONAMIENTO

03.3 Operación de carga y descarga

Partiendo de la posición en que ha quedado la bancada tras la descarga (A):

CARGA



- Cargar la camilla hasta que quede bloqueada por el cierre (1)
- Plegar la rampa de carga (2)
- Tirar de la maneta de carga (3)
- Tire de la bancada hacia la posición cero o de reposo (B)
- Deslizar la bandeja hasta escuchar "clack", posición de bloqueo efectuada (C)
- Puede guardar la camilla cuchara fijandola a los ganchos frontales (4)

DESCARGA

- Extraiga la bandeja mediante la palanca de extracción (5)
- La bandeja se inclinara automaticamente hacia la posición de carga (A)
- Abra la rampa de carga (2)
- Liberar el cierre de la camilla accionando la palanca (1)
- La camilla se deslizará hacia fuera, mantengala sujeta con las manos (A)
- Extraer la camilla

ESFUERZO POSICIÓN DE CARGA A POSICIÓN HORIZONTAL

	KG
· BANCADA AL VACÍO	16
· BANCADA + CAMILLA PC650 VACÍA	25
· BANCADA + CAMILLA PC650 + DUMMY 80KG	21

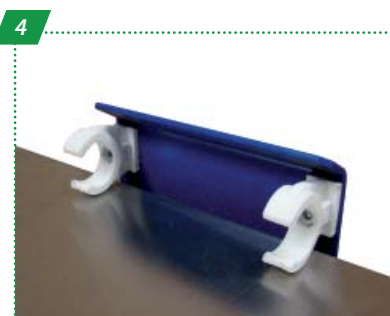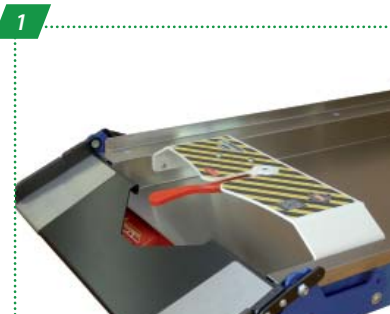

03 FUNCIONAMIENTO

03.4 Sujeción de la camilla palas

PARA MODELOS PB-410 • PB-410/3

FIJACIÓN

Para colocar las camillas palas modelo PC 335 y PC 337, se desliza la camilla palas boca abajo, entre la chapa de anclaje de la camilla y la bandeja hasta hacer tope con las pinzas de sujeción, una vez se hace contacto, apretar fuertemente la camilla hasta que quede anclada.



EXTRACCIÓN

Para extraer la camilla palas, tirar fuertemente de ella hasta que se desenclave de las pinzas de sujeción.

Para su comodidad, recomendamos que coja la camilla por el rodillo para hacer mas fuerza.



PARA MODELO PB-410/4

FIJACIÓN

Para colocar las camillas palas modelo PC-335 y PC-337, se desliza la camilla palas boca abajo, entre la chapa de anclaje de la camilla y la bandeja hasta hacer tope con las pinzas de sujeción, una vez se hace contacto, apretar fuertemente la camilla hasta que quede anclada.



EXTRACCIÓN

Para extraer la camilla palas, tirar fuertemente de ella hasta que se desenclave de las pinzas de sujeción.

Para su comodidad, recomendamos que coja la camilla por el rodillo para hacer mas fuerza.




03 FUNCIONAMIENTO

03.5 Tensores

Para ajustar la tensión de los cables de accionamiento, la bancada dispone de cuatro juegos de tensores para su regulación (según modelo):


1. PALANCA DE MOVIMIENTO LATERAL

Doble juego de tensores situados en cada una de las placas de fijación al suelo.

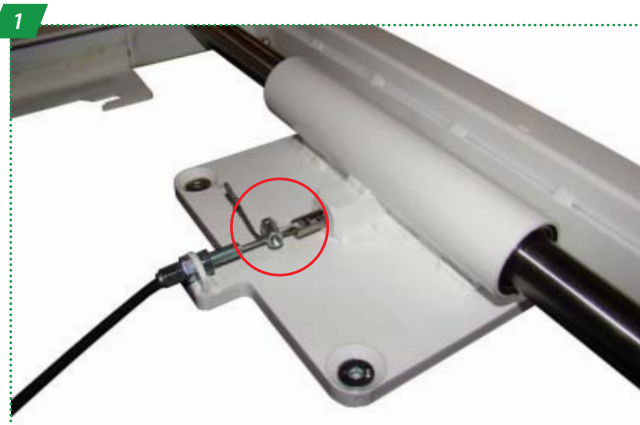


2. MANETAS DELANTERAS

Doble juego de tensores situados en la zona delantera de la plataforma.

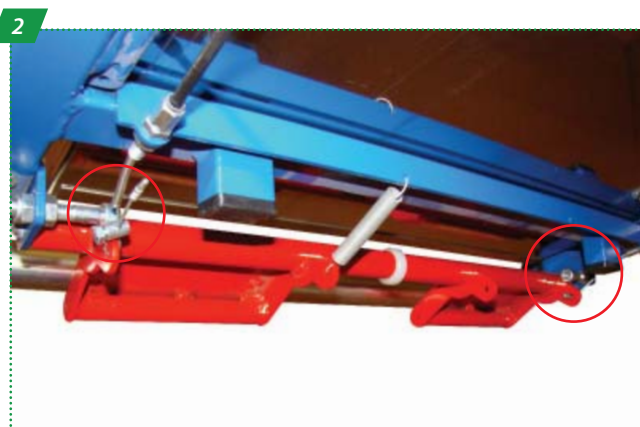

3. MANETAS LATERALES

Tensor simple situado en la zona derecha de la plataforma superior.

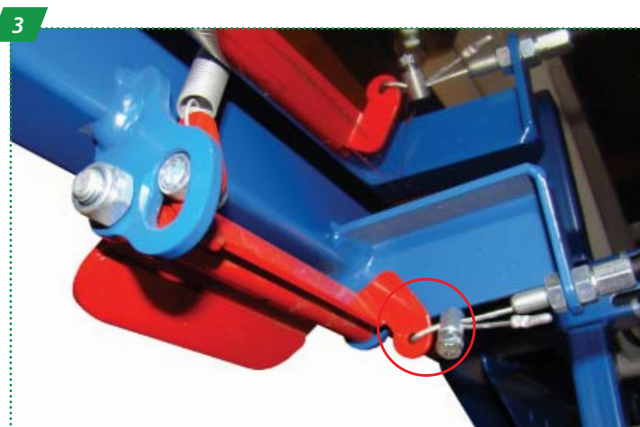

03 FUNCIONAMIENTO

03.6 Regulación del ángulo de carga


Para una óptima operación de carga y descarga de la camilla es muy importante graduar la inclinación lo más horizontal posible de la bancada.

Para ello debe seguir los pasos siguientes:

ATAQUE DE LA CAMILLA

Una vez instalada la bancada en su posición final dentro de la ambulancia sitúe la rampa en posición desplegada y gradúe su inclinación mediante la maneta frontal derecha (CARGAR/LOADING).

La posición óptima es aquella en la cual las ruedas de ataque de la camilla entran en contacto con el rodillo de la rampa, es entonces cuando la carga será más suave y con menor esfuerzo (ver imagen 1).

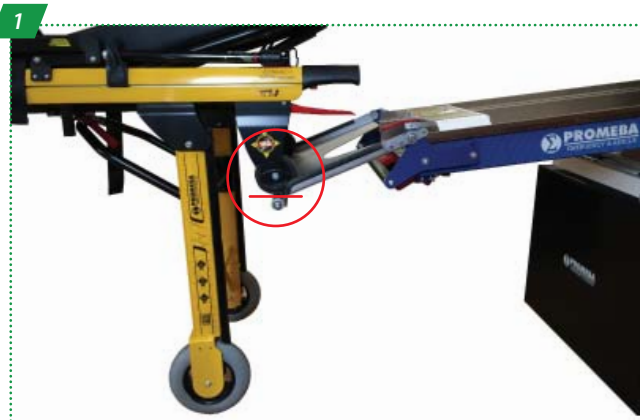

AJUSTAR EL TOPE DEL ANGULO DE CARGA



Posteriormente al paso anterior debemos regular el tope según se muestra en la imagen 2.

Esta pieza es la que mantendrá nuestro ángulo de carga fijo para las posteriores operaciones.

Para ello disponemos de dos tornillos hexagonales que deberemos aflojar, situaremos el rodillo en contacto con la base de la bancada como se muestra en la imagen 2 y volveremos a apretar los tornillos según se ve en la imagen 3.


Esta operación se deberá ajustar tantas veces sea necesario en función de la camilla y/o vehículo utilizado.

UN ÓPTIMO REGLAJE ES IMPRESCINDIBLE PARA UNA CARGA SUAVE Y SIN ESFUERZOS.

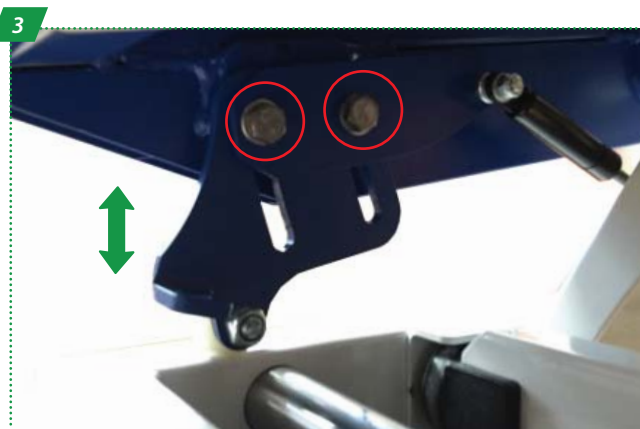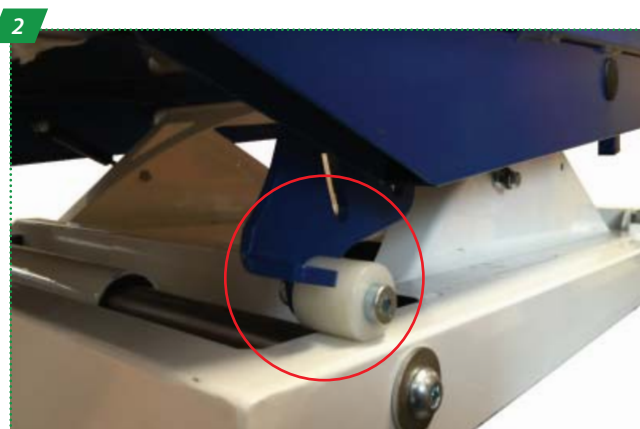


04 MONTAJE Y DESPIECE

04.1 Explosionado general SERIE PB410

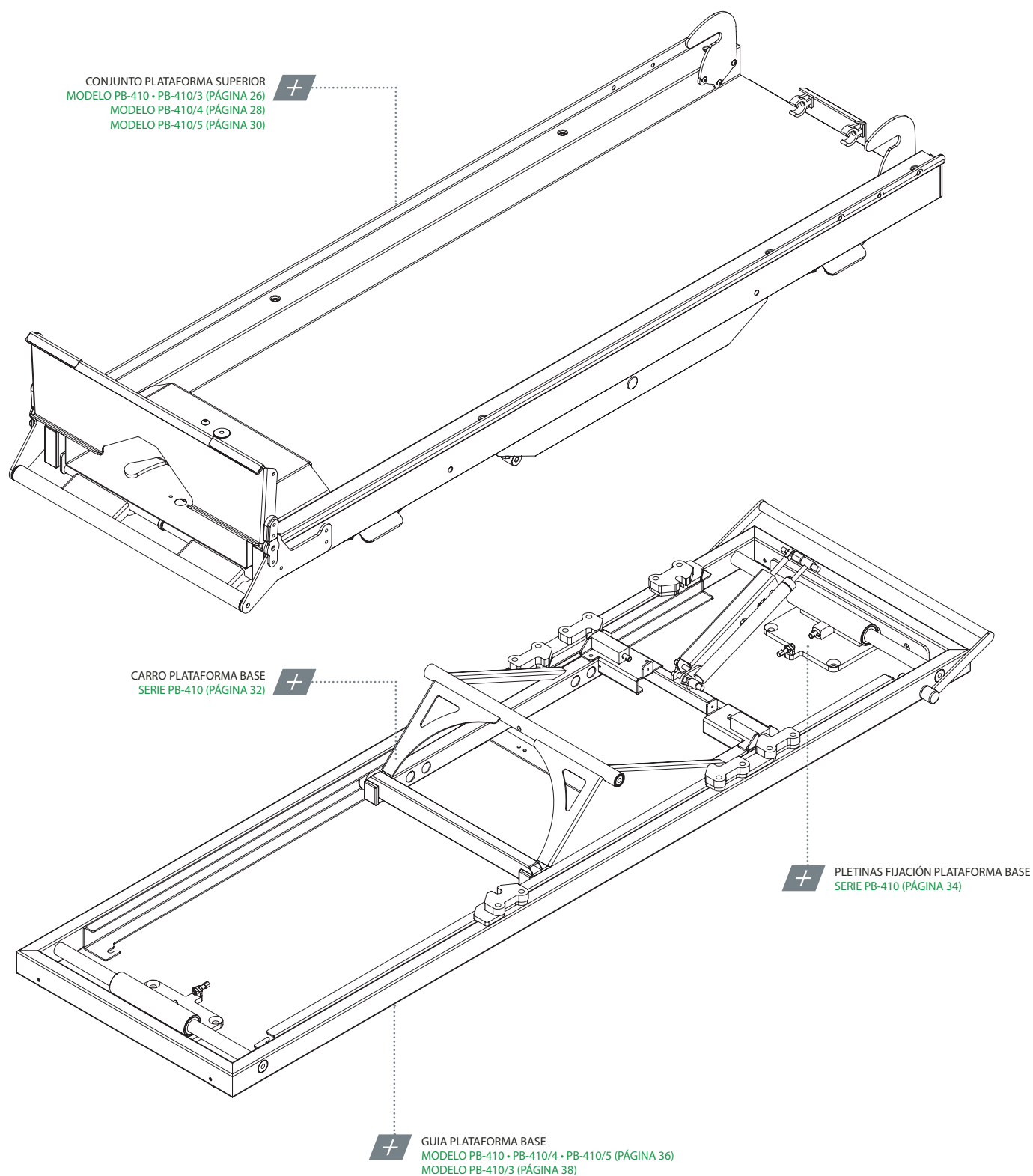

04 MONTAJE Y DESPIECE

04.2 Explosionado plataforma superior PB-410 • PB-410/3

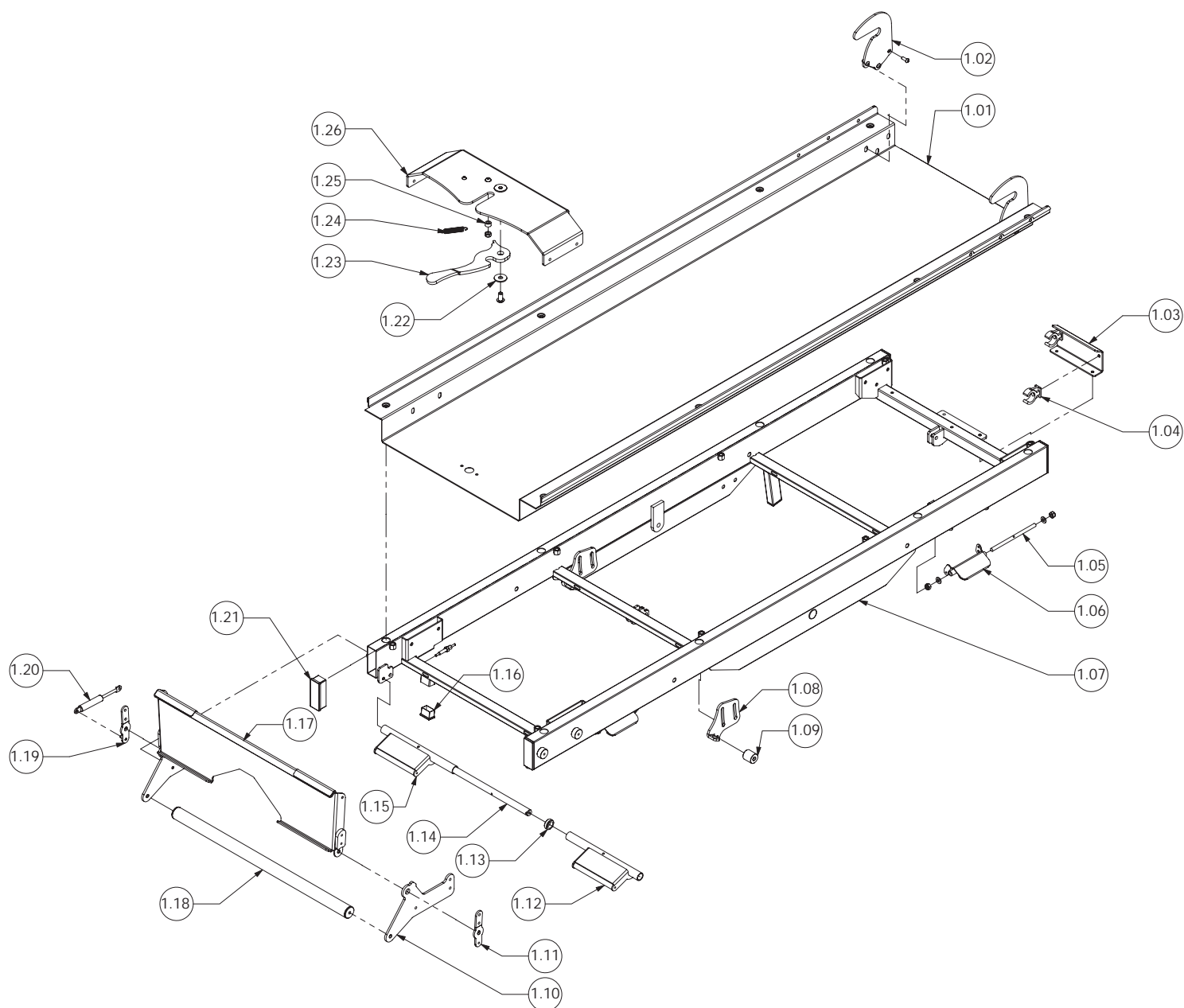


04.3 Listado de referencias: PLATAFORMA SUPERIOR PB-410 • PB-410/3

27

04 MONTAJE Y DESPIECE

04.4 Explosionado plataforma superior PB-410/4

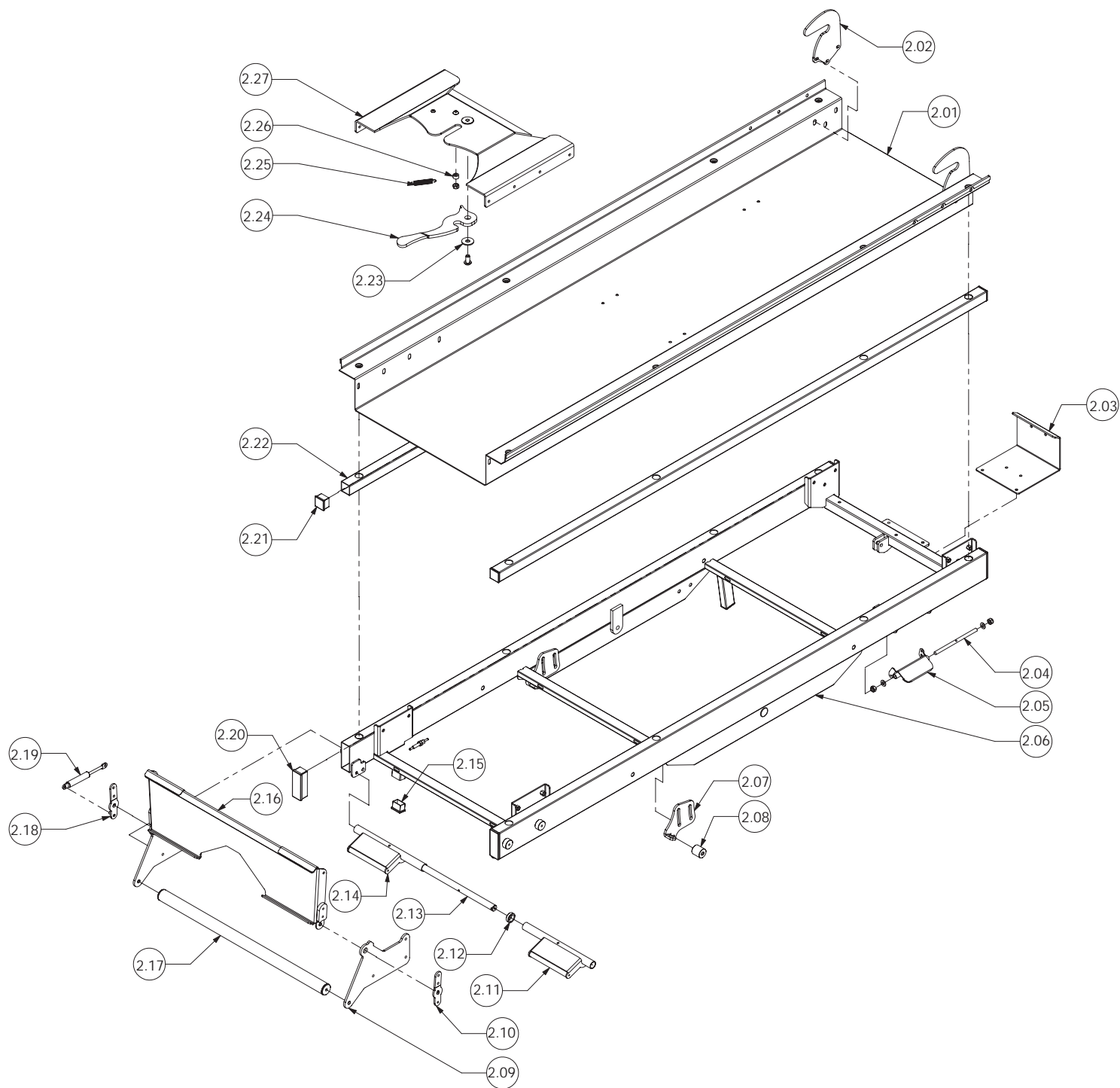


04.5 Listado de referencias: PLATAFORMA SUPERIOR PB-410/4

29

04 MONTAJE Y DESPIECE

04.6 Explosionado plataforma superior PB-410/5

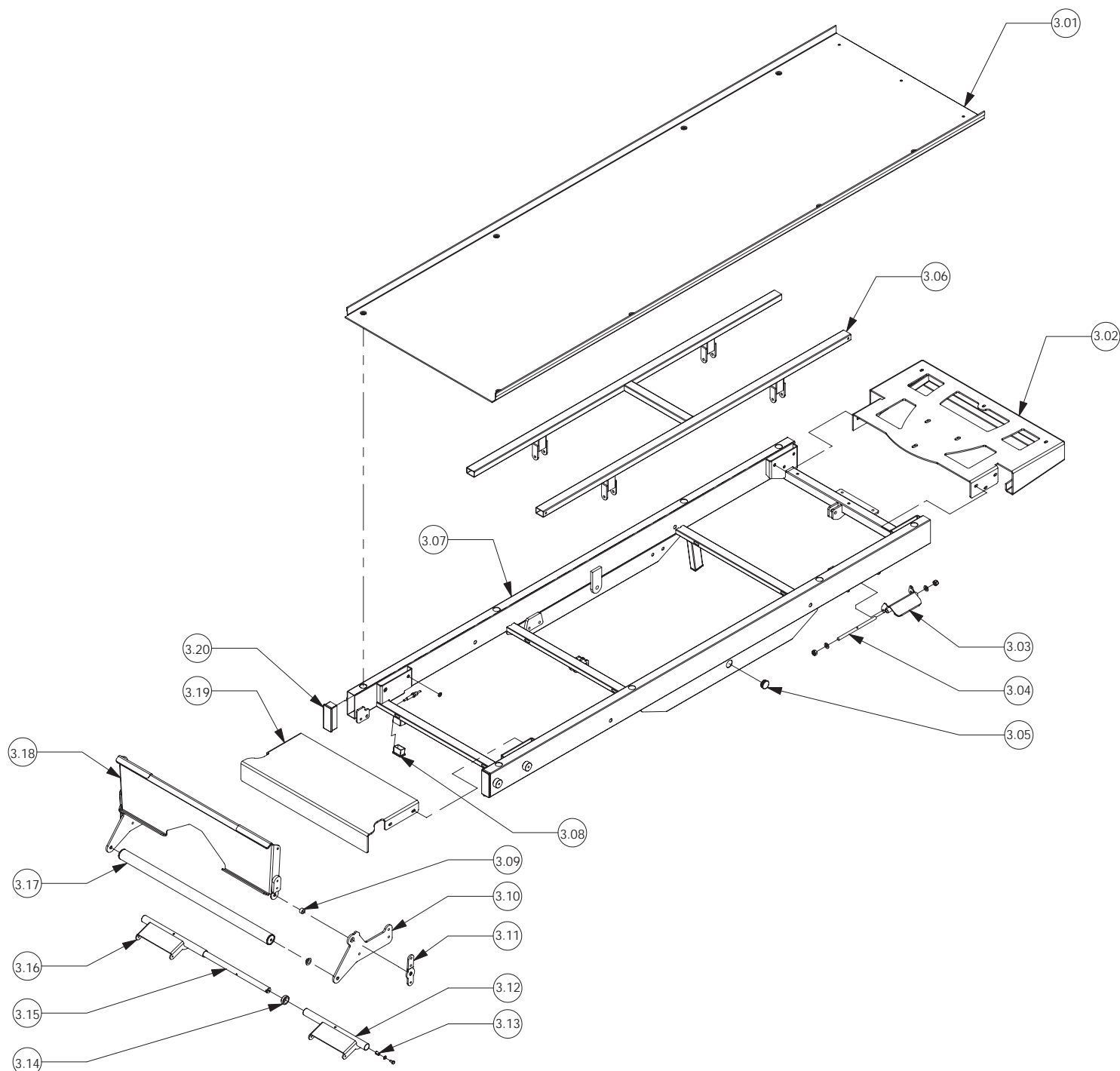


04.7 Listado de referencias: PLATAFORMA SUPERIOR PB-410/5

31

04 MONTAJE Y DESPIECE

04.8 Explosionado carro plataforma base **SERIE PB-410**

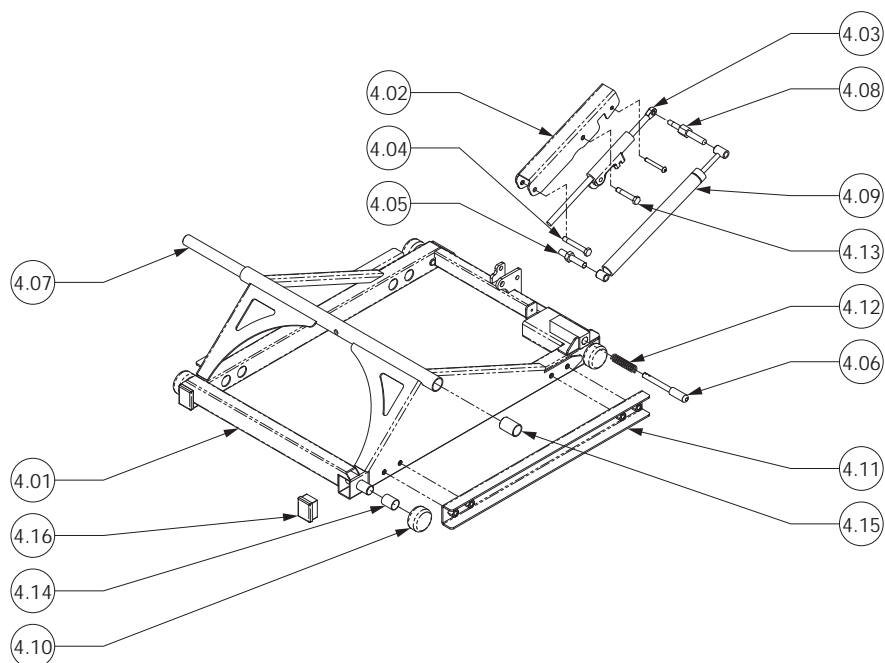

04 MONTAJE Y DESPIECE

04.9 Listado de referencias:

CARRO PLATAFORMA BASE


SERIE PB-410

Nº ELEMENTO	CODIGO - DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
-------------	----------------------	----------

4.01	PB4100-03012 - SUBCONJUNTO CARRO PLATAFORMA BASE	1
4.02	PB4100-00352 - SOPORTE MECLOCK CHAPA	1
4.03	PB4100-00270 - VÁSTAGO FIJADOR MECLOCK	1
4.04	PB4100-00341 - SOPORTE FIJADOR MECLOCK	1
4.05	PB4100-00401 - SUJECCIÓN INTERIOR AMORTIGUADOR	1
4.06	PB4100-00291 - VALDA FIJACIÓN CARRO	1
4.07	VAR DIAM20A482 - EJE VARILLA CALIBRADA	1
4.08	PB4100-00411 - SUJECCIÓN SUPERIOR AMORTIGUADOR	1
4.09	PB4100-00380 - AMORTIGUADOR STABILUS	1
4.10	PB4100-03110 - RUEDA NYLON GUIAS CARRO	4
4.11	PB4100-03212 - SUBCONJUNTO SUFRIDERA CARRO	2
4.12	PB4100-01020 - MUELLE COMPRESIÓN	1
4.13	PB4100-00391 - EJE GIRO SOPORTE FIJADOR	2
4.14	CAPAP2030P10 - CASQUILLO TEFLÓN REF-PAP 20X30 P10	4
4.15	PB4100-03230 - CASQUILLO TEFLON 18X25 P10	2
4.16	TAPPLA-40X30 - TAPON PLÁSTICO INTERIOR 40X30	2

04 MONTAJE Y DESPIECE

04.10 Explosionado pletinas sujeción plataforma base **SERIE PB-410**

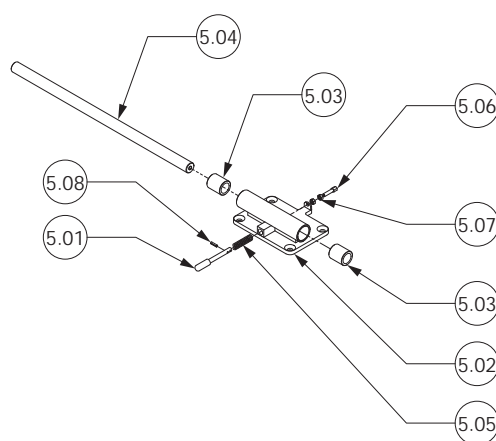

(2 CONJUNTOS POR BANCADA)

04.11 Listado de referencias:


PLETINA SUJECCIÓN PLATAFORMA BASE

SERIE PB-410

35

04 MONTAJE Y DESPIECE

04.12 Explosionado guía plataforma base PB-410 • PB-410/4 • PB-410/5

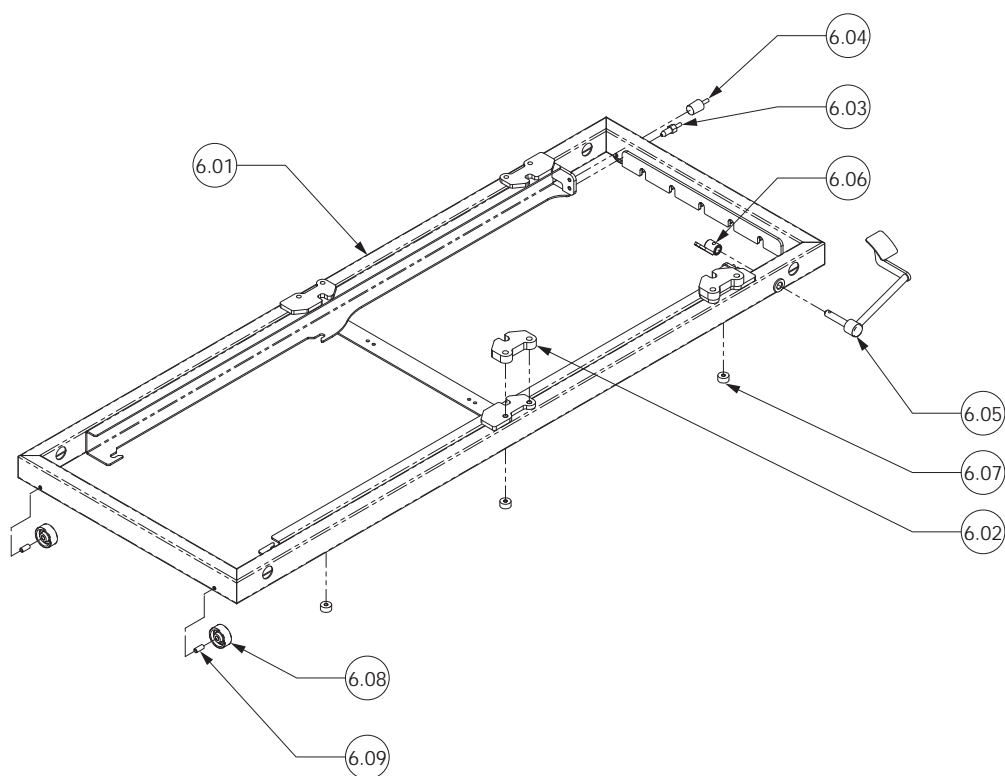


04.13 Listado de referencias: GUIA PLATAFORMA BASE PB-410 • PB-410/4 • PB-410/5

37

04 MONTAJE Y DESPIECE

04.14 Explosionado guía plataforma base PB-410/3

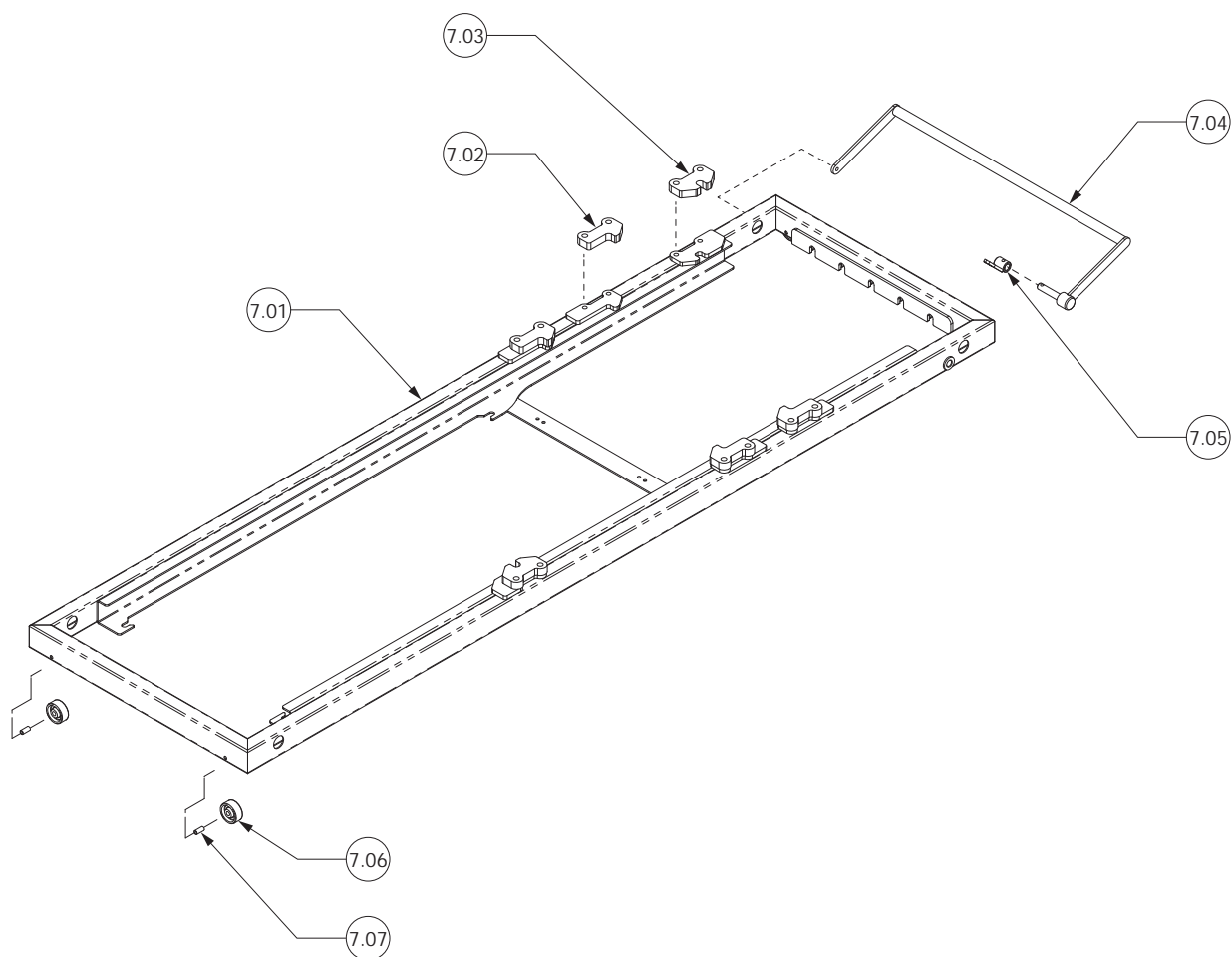

04.15 Listado de referencias: GUIA PLATAFORMA BASE PB-410/3

39

05 MANTENIMIENTO GENERAL

LIMPIEZA

Mantener el equipo limpio es fundamental para garantizar un buen uso y durabilidad del conjunto. Es necesario efectuar una limpieza en profundidad periódicamente, sobre todo en zonas expuestas a la suciedad que puedan sufrir daños como son engranajes, conectores, pulsadores, etc. No utilice sistemas de lavado a alta presión, pueden dañar al producto.

MANDOS Y SELECTORES

Debido al uso intenso y continuado de los elementos móviles como son los mandos y selectores revise periódicamente el buen funcionamiento de los mismos. Pueden existir fallos en los micro-ruptores y cableado, revise las fijaciones y las conexiones eléctricas o mecánicas que pudieran existir.

ENGRASE

En general toda parte móvil deberá engrasarse. Nuestros productos salen de fábrica completamente engrasados y lubricados, no obstante, es posible que con el tiempo y uso del producto los elementos se desengrasen, bien por pérdida de lubricación o bien por suciedad. Limpie y engrase periódicamente las zonas afectadas según las especificaciones del fabricante.

Compruebe que no haya piezas flojas, faltantes o desgastadas. Inspeccione periódicamente todos los elementos móviles para asegurarse que los componentes están apretados.

ZONAS DE DESGASTE

Inspeccionar regularmente para ver si hay desgaste en los componentes del sistema es una medida preventiva que puede disminuir averías. Verifique posibles fugas de lubricante, estrías o cojinetes en mal estado.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICA

En general llamamos elementos de fijación mecánica a los componentes que se utilizan para fijar el conjunto del producto, principalmente tornillería y derivados.


En algunas condiciones de uso, debido a vibraciones o impactos, ciertos elementos pueden perder su par de apriete o propiedades de fijación.

Revise periódicamente que no existan elementos sueltos, sobretodo en partes móviles del conjunto. Tenga en cuenta y respete siempre los pares de apriete recomendados.

SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES

Este manual de instrucciones no incluye procedimientos para todas las piezas. Lo habitual es que el personal de servicio cualificado sustituya los cables, los conmutadores y ciertas piezas mecánicas sin necesidad de procedimientos paso a paso.

El personal de servicio técnico cualificado deberá ponerse en contacto con nuestro departamento comercial para obtener información sobre el pedido de piezas y su instalación.

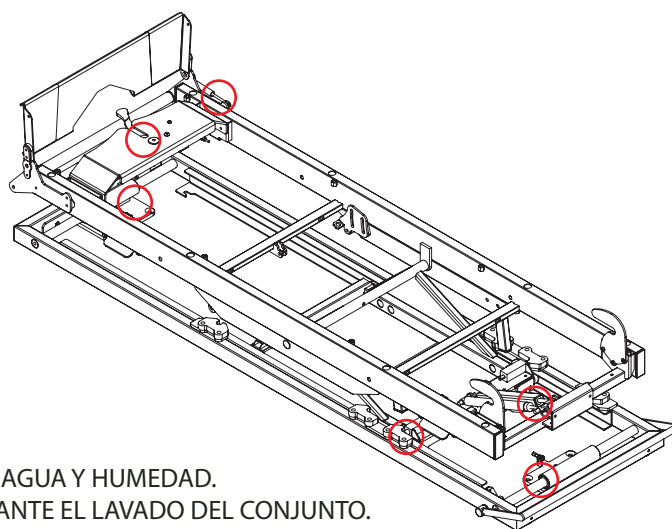

ASEGURESE DE MANTERER ESTAS ZONAS LIBRES DE AGUA Y HUMEDAD.
PONGA ESPECIAL CUIDADO EN NO MOJARLAS DURANTE EL LAVADO DEL CONJUNTO.

06 AVISOS LEGALES

Es posible que este documento contenga imprecisiones técnicas o errores tipográficos.

Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; dichos cambios se incorporaran en nuevas ediciones de la publicación.

Promeba, S.L. se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificación o mejora en los productos que se describen en esta publicación.

Promeba, S.L. puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este documento. La posesión de este documento no confiere ninguna licencia sobre dichas patentes.

La información contenida en este documento no afecta ni cambia las especificaciones o garantías del producto de **Promeba, S.L.**

Ninguna parte de este documento deberá regir como licencia explícita o implícita o indemnización bajo los derechos de propiedad intelectual de **Promeba, S.L.** o de terceros.

Toda la información contenida en este documento se ha obtenido en entornos específicos y se presenta como ilustración. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Promeba, S.L. puede utilizar o distribuir la información que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.

07 GARANTÍA DE PRODUCTO

Promeba, S.L. garantiza que sus productos han pasado satisfactoriamente todos los controles de calidad establecidos, tanto funcionales, como materiales. La duración de la garantía es de 2 años a partir de la fecha de compra del producto.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura original o comprobante de compra (indicando la fecha de compra, modelo y el nombre del distribuidor) junto con el producto defectuoso durante el periodo que cubre la garantía. **Promeba, S.L.** se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados o si la información que los mismos contienen es incompleta o ilegible.

1. Esta garantía no será de aplicación si el nombre del modelo o el número de serie del producto ha sido alterado, borrado, ha desaparecido o resulta ilegible.

*2. Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto a y desde **Promeba, S.L.***

3. Esta garantía no cubre ninguno de los supuestos siguientes:

a) Mantenimiento periódico y reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste normales.

b) Material fungible (componentes que se prevé necesiten recambios periódicos durante la vida del producto, tales como baterías no recargables, bombillas, etcétera).

c) Daños o defectos derivados del uso, funcionamiento o tratamiento del producto indebidos y no por causa de un uso normal del producto.

d) Daños derivados de:

i. Uso indebido, incluido:

- Tratamiento que derive en daños o cambios físicos, superficiales o de apariencia del producto.

- Instalación, utilización o almacenamiento del producto de manera que no respete las instrucciones descritas por **Promeba, S.L.**

- Mantenimiento del producto de manera que no respete las instrucciones de **Promeba, S.L.** para su debido mantenimiento.

- Instalación o utilización del producto de manera que no respete las normas técnicas o de seguridad del país donde es usado o instalado.

ii. Utilización de componentes no proporcionados con el producto o instalación incorrecta de partes accesorias no testadas anteriormente.

iii. Estados o defectos del sistema en el que se usa o se incorpora el producto con la excepción de otros productos **Promeba, S.L.** diseñados para su uso con el producto.

iv. Utilización del producto con accesorios, unidades periféricas y otros productos de un tipo, condición o normas no establecidas por **Promeba, S.L.**

v. El fabricante o distribuidor será el único responsable en decidir el envío de las piezas para su reparación, o bien la sustitución del producto en su totalidad. En ningún caso se enviarán operarios para dicha reparación o sustitución del producto.

Excepto en los casos mencionados más arriba, **Promeba, S.L.** no otorgará garantías con relación al producto, el funcionamiento, la precisión, la fiabilidad o la adaptabilidad a una finalidad del equipo lógica o de otro tipo. Si esta excepción no es lícita o contemplada por la ley vigente, **Promeba, S.L.** limitará o excluirá sus garantías sólo en la medida en que la ley vigente lo permita.

La única obligación por parte de **Promeba, S.L.** en relación con esta garantía es reparar o sustituir las piezas sujetas a los términos y condiciones de esta garantía.

Promeba, S.L. no es responsable de la pérdida o daño de productos, esta garantía u otros, incluyendo pérdida económica o daños no evaluables; el precio pagado por el producto; pérdida de beneficios, ingresos, información, usufructo o utilización del producto o de productos asociados o pérdida o daños indirectos, accidentales o críticos.

Esta cláusula se refiere a si la pérdida o daños es debida a deterioro o inoperatividad del producto asociado por defectos o indisponibilidad de **Promeba, S.L.**, que ha causado un tiempo de inactividad, la pérdida del tiempo del usuario o una interrupción del negocio.

En los casos en los que la ley prohíba o limite estas exclusiones de responsabilidad, **Promeba, S.L.** excluirá o limitará su responsabilidad sólo en la medida en la que la ley vigente lo permita. Por ejemplo, hay países que prohíben la exclusión o limitación de daños provocados por negligencia, negligencia temeraria, falta deliberada, fraude y actos similares. La responsabilidad de **Promeba, S.L.** en esta garantía no excederá, en ningún caso, el precio pagado por el producto, pero si la ley vigente permite únicamente limitaciones de responsabilidades mayores, éstas se aplicarán.



Todos los derechos reservados. Reservado el derecho ha modificaciones sin previo aviso.
Promeba, S.L. no se considera responsable de los daños causados por la falta o la inexactitud de la información aquí mencionada.

*All rights reserved. Variations can be done whitout notice.
Promeba, S.L. is to be considered not responsible for damages caused by the lack or the wrongness of the information here mentioned.*

SCAN QR CODE



PROMEBA, S.L.

Ctra C-16 Km 59,5 · 08650 Sallent (Barcelona) · SPAIN
T. 93 837 12 00 · Fax 93 820 61 08
promeba@promeba.com · www.promeba.com